



مروا سپت ۲٪

ژل کلرهگزیدین ۲٪

مروا سپت ۲٪

ژل کلرهگزیدین ۲٪

ژل کلرهگزیدین ۲ درصد جهت آماده سازی کانال ریشه می باشد. **مروا سپت ۲٪** به طور اختصاصی با هدف ضد میکروبی اندودونتیک طراحی شده است. این محصول در از بین بردن میکرو ارگانیسم هایی مانند آنتروکوک فوکالپس که در درمان های دندانپزشکی اغلب مقاوم به درمان هستند، بسیار موثرتر از سدیم

کاربردها:

• **ژل کلرهگزیدین** آماده سازی کانال ریشه را تسهیل می نماید. این ژل با خاصیت روان کنندگی، استفاده از ابزارهای کاربردی در کانال ریشه را بسیار آسان می نماید. **مروا سپت** جهت ضد عفونی اندودونتیک در شستشوی نهایی توصیه می شود و بهتر است پس از برداشتن لایه اسمیر توسط ادتا بکار برده شود. در طول درمان مجدد اندودونتیک در مواردی که عامل عفونت آنتروکوک فوکالپس و یا کاندیدا آلیکانس می باشد مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین در التهاب های غیر قابل التیام در بافت های اطراف رأس ریشه کاربرد دارد.

طریقه استعمال:

• **ژل مروا سپت** را جهت آماده سازی مکانیکی کانال ریشه به وسیله سرنگ، همراه با سر سوزن بطور مستقیم، داخل و یا اطراف دهانه ورودی کانال تزریق نمایید و به مدت ۶۰ ثانیه صبر کنید (ژل مروا سپت را پشت حفره انتهایی (اپیکال فورم) تزریق ننمایید). پس از آن کانال را با محلول کلرهگزیدین ۲٪ یا آب مقطر شستشو دهید. قبل از استفاده از ابزاری با سایز دیگر، مجدداً از ژل استفاده ننمایید و سپس کانال ریشه را شستشو دهید. بعد از شستشو دقیق کانال ریشه را خشک نموده و سپس پر نمایید.

هشدار:

• این محصول به طور مستقیم با محلول سدیم هیپوکلریت در کانال مخلوط نشود؛ زیرا باعث تشکیل رسوبات قهوه ای رنگ خطرناکی می شود. با دقت مصرف شود و پس از استفاده، کلاهی سرنگ را روی آن قرار دهید. ژل خروجی از سرنگ مجدداً به داخل اسپیره ننمایید.


مزايا:

- افزایش قدرت اتصال دنتین به عوامل باندینگ
- فعالیت ضد باکتریال موثر و طولانی مدت
- ویسکوزیته مناسب جهت کنترل روند کار در کانال ریشه
- کلاهی سرنگ از هدر رفتن و آلوده شدن ژل بعد از مصرف جلوگیری می کند. سر سوزن زاویه دار فلزی به شما کمک می کند تا دقیقاً در محل مورد نظر، ژل را تزریق کنید.

ژل مروا-سپت ۲٪ باعث افزایش زمان باقیماندن مواد در داخل کانال و جلوگیری از خروج سریع آنها می شود.

توجه:

- فقط برای مصارف دندانپزشکی استفاده شود.
- از تماس با چشم و پوست خودداری شود.
- در صورت تماس با چشم؛ با مقدار فراوان آب شسته شود. به پزشک مراجعه شود.
- در صورت تماس با پوست؛ با مقدار فراوان آب شسته شود.
- در صورت بلع؛ دهان را با آب شستشو دهید. مقداری آب خورنده شود. از تحریک بیمار جهت استفراغ خودداری شود.
- در جای خشک و خنک نگهداری شود.

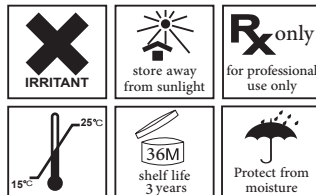

تهیه شده در شرکت مروابن

ساخت ایران

MORVABON.COM



سازمان بین‌المللی
استانداردسازی
نظارت و معیاری

شماره پروانه ساخت
۷۷۳۴۰۷۰۳
IMD: 48828681



ISO 10004:2012

ISO 13485: 2015

- سیستم مدیریت تضمین کیفیت تجهیزات پزشکی
- ISO 13485 از: US cert تحت نظارت IAS
- سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
- سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015
- سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 18001:2007
- سیستم مدیریت شکایات مشتریان ISO 10002:2014
- سیستم اندازه گیری و آنالیز رضایتمندی مشتریان ISO 10004:2012

MORVA-Sept %2

Chlorhexidine Gluconate %2 Gel

Green Mint taste and odor Gelgr

Chlorhexidine Gluconate %2 Gel preparation of root canal with mint flavor.

MORVA-Sept %2 is specifically designed endodontic disinfecting purpose only.

This product is more efficient than sodium hypochlorite in destroying such microorganisms as *E. faecalis* who are often responsible for unsuccessful endodontic treatment.

Application:

Chlorhexidine Gluconate %2 Gel facilitates preparation of the root canal.

The lubricants make the introduction of the instrument into the root canal much easier especially recommended.

MORVA-Sept is recommended for endodontic disinfection as a final endodontic rinse, and it should be used after smear layer removal by EDTA.

- ▶ During the endodontic re-treatment, in case of infection caused by enterococcus faecalis or candida albicans.
- ▶ In case of non-healing inflammation of preapical tissues.

Instruction for Use:

- ▶ Insert **MORVA-Sept** gel into the canal using a syringe with applicator or a needle with side portal or directly on the canal instrument for 60 seconds, thereafter during the mechanical preparation of the root canal is recommended.
- ▶ Do not insert **MORVA-Sept** gel beyond the apical foramen.
- ▶ Next rinse the canal with copious amount of Chlorhexidine Gluconate liquid %2 or distilled water.
- ▶ Before using the instrument of another size use gel again, thereafter rinse the root canal.

Caution:

- ▶ Do not mix directly with a NaOCl solution in the canal as a harmful brown precipitate will form.

- ▶ Apply carefully and replace needle with security cap after use.
- ▶ Do not express contents of unit does syringe back into the in dispense syringe.


Advantages:

- ▶ Increase bond strength with dentin bonding agents.
- ▶ Longest and most effective antibacterial activity
- ▶ Ideal viscosity to ensures effective application in root canal
- ▶ A special displacer cap prevents material from being wasted and contaminated.
- ▶ The angled metal tip enables exact application.

MORVA-Sept enables the material be placed and retained in the canal whitout quickly running out.

Warning:

- ▶ For professional dental use only.
- ▶ Avoid contact with skin and eyes.
- ▶ Eye contact: flush eyes with plenty of water. Get innediate nedical attention.
- ▶ Skin contact: flush skin with plenty of water.
- ▶ Ingestion: wash out mouth with water. Give water to drink. Do not induce vomiting.
- ▶ **Keep in cool and dry place.**

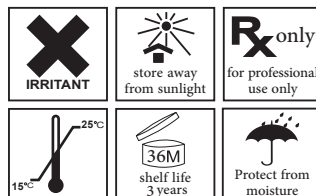

Produced by Morvabon Co.
www.morvabon.com
info@morvabon.com
Made in IRAN



MORVA-Sept %2

Chlorhexidine Gluconate %2 Gel



Production
License No.
77340703
IMD: 48828681



ISO 13485: 2016

- ISO13485 : 2016 , US cert, IAS, USA
- Iso 9001: 2015, Tuv certification, Germany
- Iso 14001: 2015, Tuv certification, Germany
- Iso 18001: 2007, Tuv certification, Germany
- Iso 10002: 2014, Tuv certification, Germany
- Iso 10004: 2012, Tuv certification, Germany